

**TRAUMEC**  
*Tecnologia e Implantes*

# MANUAL DO USUÁRIO

## MANUAL DEL USUARIO

### USER MANUAL

Produto:

Agulha para Microdissecção Traumec

(Nome técnico: Eletrodo Descartável)

**Producto:**

Aguja para Micro disección Traumec

(Nombre técnico: Electrodo Descartable)

**Product:**

Needle for microdissection Traumec

(Technical name: Disposable Electrode)

LER MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE FAZER USO DO PRODUTO

PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR

PRODUTO ESTÉRIL - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vendido.

Armazene e Transporte: o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +10° à +40°C – Umidade Relativa: 85% máxima





**LEER EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

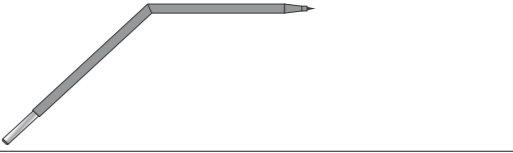



**PRODUCTO DE USO ÚNICO - PROHIBIDO REPROCESAR**

**PRODUCTO ESTERILIZADO - ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO**

No utilizar el producto si el embalaje estuviera dañado, violado o si el producto estuviera vencido.

Almacene y transporte el producto en local limpio y seco, lejos del calor y al abrigo de la luz directa, bajo temperatura: +10° a +40°C - humedad Relativa 85% máxima.

Ref.	Descrição - Descripción - <i>Description</i>	Imagem do produto - Imagen del producto - <i>Product Image</i>
PA.02.03.0033	Dissector curvo 106 x 3mm E Disector curvo 106 x 3mm E <i>Curved dissector 106 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0034	Dissector curvo 131 x 3mm E Disector curvo 131 x 3mm E <i>Curved dissector 131 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0035	Dissector curvo 156 x 3mm E Disector curvo 156 x 3mm E <i>Curved dissector 156 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0036	Dissector curvo 182 x 3mm E Disector curvo 182 x 3mm E <i>Curved dissector 182 x 3mm E</i>	

PA.02.03.0037	Dissector em curva 45° 108 x 3mm E Disector en curva 45° 108 x 3mm E <i>Dissector in curve 45° 108 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0038	Dissector em curva 45° 133 x 3mm E Disector en curva 45° 133 x 3mm E <i>Dissector in curve 45° 133 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0039	Dissector em curva 45° 158 x 3mm E Disector en curva 45° 158 x 3mm E <i>Dissector in curve 45° 158 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0040	Dissector em curva 45° 184 x 3mm E Disector en curva 45° 184 x 3mm E <i>Dissector in curve 45° 184 x 3mm E</i>	

READ USER MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT

PRODUCT USE ONLY - FORBIDDEN REPROCESSING

STERILE PRODUCT - sterilized ETHYLENE OXIDE

Do not use if package is damaged or tampered with or if the product has expired.

Store and transport the product in clean, dry place away from heat and protected from direct light, in Temperature: +10 ° to +40 ° C - Relative Humidity: 85% maximum

1 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

1.1 - Nome e modelo

Nome técnico: Eletrodo Descartável

Nome comercial: Agulha para Microdissecção Traumec

1 – DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO:

1.1 - Nombre y modelo

Nombre técnico: Electrodo Descartable

Nombre comercial: Aguja para Micro disección Traumec

1 - DETAILED DESCRIPTION OF PRODUCT:

1.1 - Name and model















Technical name: Disposable Electrode


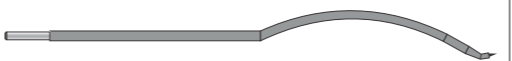
Trade Name: Needle microdissection Traumec









Modelos comerciais:



**Modelos comerciais:**





Business models:



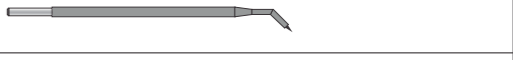




Ref.	Descrição - Descripción - <i>Description</i>	Imagem do produto - Imagen del producto - <i>Product Image</i>
PA.02.03.0006	Dissector reto 45 x 3mm E Disector recto 45 x 3mm E <i>Straight dissector 45 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0007	Dissector reto 52 x 3mm E Disector recto 52 x 3mm E <i>Straight dissector 52 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0008	Dissector reto 62 x 3mm E Disector recto 62 x 3mm E <i>Straight dissector 62 x3mm E</i>	
PA.02.03.0009	Dissector reto 84 x 3mm E Disector recto 84 x 3mm E <i>Straight dissector 84 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0010	Dissector reto 110 x 3mm E Disector recto 110 x 3mm E <i>Straight dissector 110 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0011	Dissector reto 135 x 3mm E Disector recto 135 x 3mm E <i>Straight dissector 135 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0012	Dissector reto 160 x 3mm E Disector recto 160 x 3mm E <i>Straight dissector 160 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0013	Dissector reto 186 x 3mm E Disector recto 186 x 3mm E <i>Straight dissector 186 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0014	Dissector reto 52 x 3mm E sem isolante Disector recto 52 x 3mm E sin aislante <i>Dissector Straight 52x3mm E without insulation</i>	
PA.02.03.0015	Dissector reto 62 x 3mm E sem isolante Disector recto 52 x 3mm E sin aislante <i>Dissector Straight 52x3mm E without insulation</i>	
PA.02.03.0016	Dissector reto 46,5 x 45° x 3mm E Disector recto 46,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 46,5 x 45° x 3mm E</i>	
PA.02.03.0017	Dissector reto 55,5 x 45° x 3mm E Disector recto 55,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 55,5 x 45° x 3mm E</i>	
PA.02.03.0018	Dissector reto 63,5 x 45° x 3mm E Disector recto 63,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 63,5 x 45° x 3mm E</i>	
PA.02.03.0019	Dissector reto 82,5 x 45° x 3mm E Disector recto 82,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 82,5 x 45° x 3mm E</i>	



Ref.	Descrição - Descripción - <i>Description</i>	Imagem do produto - Imagen del producto - <i>Product Image</i>
PA.02.03.0041	Dissector em contorno 155 x 3mm E Disector en contorno 155 x 3mm E <i>Dissector in contour 155x3mm E</i>	
PA.02.03.0042	Dissector em contorno 181 x 3mm E Disector en contorno 181 x 3mm E <i>Dissector in contour 181x3mm E</i>	









PA.02.03.0043	Dissector reto 45 x 3mm N Disector recto 45 x 3mm N <i>Straight dissector 45 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0044	Dissector reto 52 x 3mm N Disector recto 52 x 3mm N <i>Straight dissector 52 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0045	Dissector reto 62 x 3mm N Disector recto 62 x 3mm N <i>Straight dissector 62 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0046	Dissector reto 84 x 3mm N Disector recto 84 x 3mm N <i>Straight dissector 84 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0047	Dissector reto 110 x 3mm N Disector recto 110 x 3mm N <i>Straight dissector 110 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0048	Dissector reto 135 x 3mm N Disector recto 135 x 3mm N <i>Straight dissector 135 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0049	Dissector reto 160 x 3mm N Disector recto 160 x 3mm N <i>Straight dissector 160 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0050	Dissector reto 186 x 3mm N Disector recto 186 x 3mm N <i>Straight dissector 186 x 3mm N</i>	



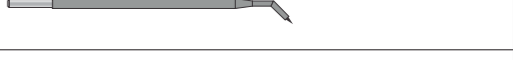

PA.02.03.0051	Dissector reto 52 x 3mm N sem isolante Disector recto 52 x 3mm N sin aislante <i>Dissector Straight 52x3mm N without insulation</i>	
PA.02.03.0052	Dissector reto 62 x 3mm N sem isolante Disector recto 62 x 3mm N sin aislante <i>Dissector Straight 62x3mm N without insulation</i>	

Ref.	Descrição - Descripción - <i>Description</i>	Imagem do produto - Imagen del producto - <i>Product Image</i>
PA.02.03.0020	Dissector reto 108,5 x 45° x 3mm E Disector recto 108,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 108,5 x 45° x 3mm E</i>	
PA.02.03.0021	Dissector reto 133,5 x 45° x 3mm E Disector recto 133,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 133,5 x 45° x 3mm E</i>	
PA.02.03.0022	Dissector reto 158,5 x 45° x 3mm E Disector recto 158,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 158,5 x 45° x 3mm E</i>	
PA.02.03.0023	Dissector reto 184,5 x 45° x 3mm E Disector recto 184,5 x 45° x 3mm E <i>Straight dissector 184,5 x 45° x 3mm E</i>	

PA.02.03.0024	Dissector 45° 50 x 3mm E Disector 45° 50 x 3mm E <i>Dissector 45° 50 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0025	Dissector 45° 60 x 3mm E Disector 45° 60 x 3mm E <i>Dissector 45° 60 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0026	Dissector 45° 86 x 3mm E Disector 45° 86 x 3mm E <i>Dissector 45° 86 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0027	Dissector 45° 112 x 3mm E Disector 45° 112 x 3mm E <i>Dissector 45° 112 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0028	Dissector 45° 137 x 3mm E Disector 45° 137 x 3mm E <i>Dissector 45° 137 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0029	Dissector 45° 162 x 3mm E Disector 45° 162 x 3mm E <i>Dissector 45° 162 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0030	Dissector 45° 188 x 3mm E Disector 45° 188 x 3mm E <i>Dissector 45° 188 x 3mm E</i>	

PA.02.03.0031	Dissector 90° 45 x 3mm E Disector 90° 45 x 3mm E <i>Dissector 90° 45 x 3mm E</i>	
PA.02.03.0032	Dissector 90° 55 x 3mm E Disector 90° 55 x 3mm E <i>Dissector 90° 55 x 3mm E</i>	

Ref.	Descrição - Descripción - <i>Description</i>	Imagem do produto - Imagen del producto - <i>Product Image</i>
PA.02.03.0053	Dissector reto 46,5 x 45° x 3mm N Disector recto 46,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 46,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0054	Dissector reto 55,5 x 45° x 3mm N Disector recto 55,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 55,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0055	Dissector reto 63,5 x 45° x 3mm N Disector recto 63,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 63,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0056	Dissector reto 82,5 x 45° x 3mm N Disector recto 82,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 82,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0057	Dissector reto 108,5 x 45° x 3mm N Disector recto 108,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 108,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0058	Dissector reto 133,5 x 45° x 3mm N Disector recto 133,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 133,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0059	Dissector reto 158,5 x 45° x 3mm N Disector recto 158,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 158,5 x 45° x 3mm N</i>	
PA.02.03.0060	Dissector reto 184,5 x 45° x 3mm N Disector recto 184,5 x 45° x 3mm N <i>Straight dissector 184,5 x 45° x 3mm N</i>	

PA.02.03.0061	Dissector 45° 50 x 3mm N Disector 45° 50 x 3mm N <i>Dissector 45° 50 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0062	Dissector 45° 60 x 3mm N Disector 45° 60 x 3mm N <i>Dissector 45° 60 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0063	Dissector 45° 86 x 3mm N Disector 45° 86 x 3mm N <i>Dissector 45° 86 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0064	Dissector 45° 112 x 3mm N Disector 45° 112 x 3mm N <i>Dissector 45° 112 x 3mm N</i>	
PA.02.03.0065	Dissector 45° 137 x 3mm N Disector 45° 137 x 3mm N <i>Dissector 45° 137 x 3mm N</i>	